

ProfVet Mobil for Pocket PC

1. Grunnleggende informasjon.....	1
Prinsipp	1
Maskinvare som kan brukes.....	1
2. Installasjon PPC	1
3. Daglig bruk av PPC.....	3
Obs	3
Hente data fra PPC.....	3
4. Bruk av ProfVet Mobil på PPC.....	4
Systemopplysninger	4
Registrering	4
Semin ku	5
Semin gris	5
Sædhenting.....	5
Km ekstra	5
Journal.....	6
Klinisk journal.....	6
5. Tips og triks	8
Snarvei	8
Uklar skjerm.....	8
Låst skjermbilde.....	8

1. Grunnleggende informasjon

Prinsipp

ProfVet Praksis er et PC-basert journalsystem.

ProfVet Mobil er en mini-utgave av ProfVet Praksis som kjører på Pocket PC (PPC). Her kan du registrere nye kunder, journaler, kliniske journaler, semin og sædhenting.

Maskinvare som kan brukes

Alle Pocket PC'er som kjører Windows Mobile 2003 eller nyere kan brukes.

2. Installasjon PPC

PPC må være tilkoblet en PC som kjører ProfVet Praksis. ProfVet Praksis bruker et program som heter ActiveSync til å kommunisere med PPC. Dette følger som regel med på CD når du kjøper PPC. Eventuelt så kan du laste det ned gratis fra www.microsoft.com. Når du har fått ActiveSync til å virke må du stille inn språket på PPC til norsk (bokmål eller nynorsk). På PPC går du til: Start->Settings->System->Regional Settings.

I ProfVet Praksis går du til: Vedlikeholdsrutiner->Hjelperegistre->Veterinærer. Søk fram deg selv og velg terminaltype Pocket PC.

Gå så til Journal->Daglige rutiner->Overføring Terminal. Velg veterinær fra listen og trykk på knappen en gang til. Du kommer da til følgende skjermbilde:

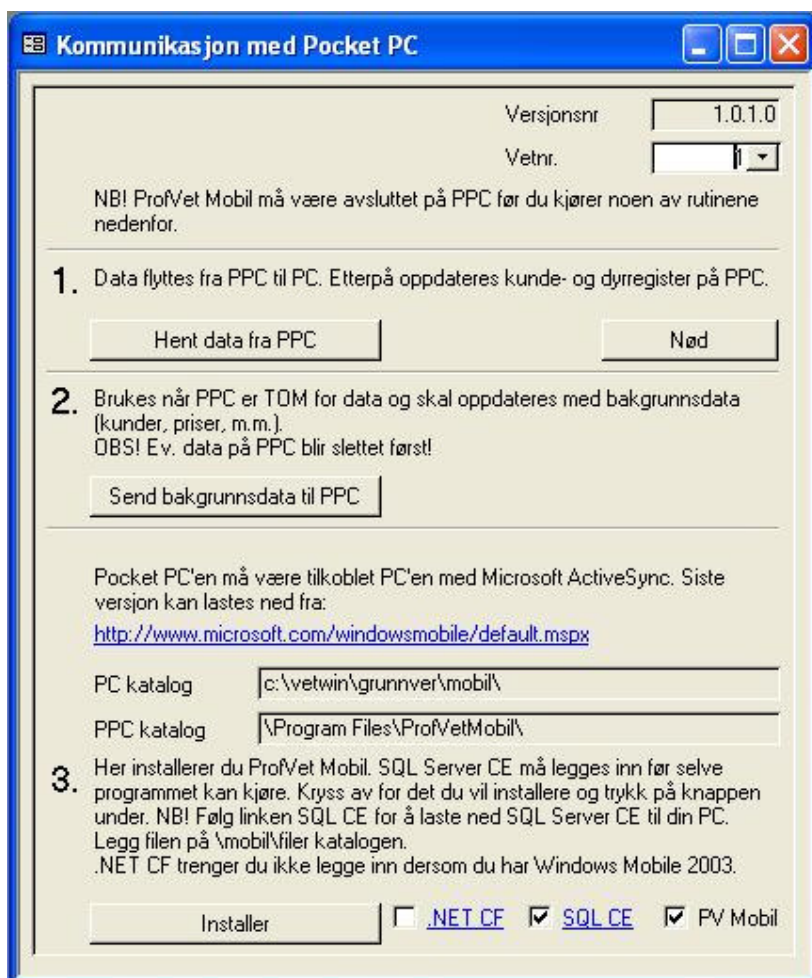


Fig 1: Kommunikasjonsskjerm bilde i ProfVet Praksis.

Dette er det eneste skjermbilde du trenger å forholde deg til i ProfVet Praksis når det gjelder kommunikasjon med PPC foruten innstillingen i veterinærskjema.

For å installere programmet første gang, må følgende filer finnes på PC'en:

C:\vetwin\grunnver\mobil\filer\sqlce.ppc3.arm.CAB

C:\vetwin\grunnver\mobil\filer\ProfvetMobil.exe

Sqlce.ppc3.arm.CAB er installasjonsfil for SQL Server CE som brukes som databasemotor på PPC. Denne kan lastes ned fra www.profvet.com ved å følge linken SQL CE i kommunikasjonsvinduet i ProfVet Praksis (se Fig 1).

ProfVet Mobil-programmet for PPC heter ProfvetMobil.exe, og blir lastet ned og lagret på korrekt sted når du kjører oppgradering av ProfVet Praksis.

Installasjonen er enkel. Du trykker bare på Installer. Felles for all kommunikasjon med PPC, er at alt blir styrt fra PC. Vær obs på at når programmet er installert og du skal overføre data til eller fra PPC, må ProfVet Mobil på PPC være avsluttet! For å være sikker på at ProfVet Mobil er avsluttet, må du gå til hovedvinduet og trykke på Avslutt.

Du kan få en melding på PPC under installasjonen om at programmet er laget i en tidligere versjon. Denne er det bare å trykke OK på.

Når programmet er på plass, kan du gå til punkt 2 i listen på Fig 1. Her blir bakgrunnsdata overført til PPC. Filer blir kopiert til PPC og så importert på denne. Dette kan ta 1-2 minutt. Du vil få en indikator på PPC som forteller hvor langt den er kommet. Når denne er ferdig, er programmet klart til bruk.

3. Daglig bruk av PPC

Når du først har fått ProfVet Mobil inn på PPC og har kommet i gang med å bruke programmet, har du oftest bruk for kun å hente data over til PC (Valg nr 1 på Fig 1).

MEN: Hvis du gjør endringer i bakgrunnsdataene (priser, takster, okser, m.m.), må disse overføres i den rutinen som heter 2. Send bakgrunnsdata til PPC (se ovenfor). Dette kan være aktuelt å gjøre av og til, bl.a. for å få oppdatert okser og råner på PPC.

Obs

Hver gang du *oppgraderer* hovedprogrammet (ProfVet Praksis) må også PPC oppdateres, dvs. valg 3. Installer må kjøres, deretter valg 2. Send bakgrunnsdata til PPC (se om dette lenger opp). Hvis du ikke oppdaterer ProfVet Mobil etter en oppgradering, vil du kunne få feilmelding og stopp ved overføring av data fra PPC.

Hente data fra PPC

I dette tilfellet har du brukt PPC til å legge inn data (journal og/eller semin). Du ønsker altså kun å tømme PPC. På PPC må du se til at ProfVet Mobil er avsluttet.

På PC-en velger du valg 1 – Hent data fra PPC (se Fig 1). Når overføringen er ferdig, vil du på PC-en få opp et vindu der det står hvor mye data som kom fra PPC. Ta en kikk på disse tallene og tenk over om dette stemmer!

4. Bruk av ProfVet Mobil på PPC.

Startbildet i ProfVet Mobil gir deg 4 muligheter og ser slik ut:

Registrer leder til startbildet for semin, sædhenting og journal. Søk viser hvilke datoer det finnes registreringer på (du har her mulighet til å slette og endre innlagte data). System brukes av systemet for å importere/eksportere data til/fra PPC. I tillegg får du se versjonsnr og veterinær/kunde-register.

Systemopplysninger

Hvis du har semin, husk å sjekke beholdernummeret under ditt veterinærnavn (særlig hvis du er vikar!). Dette skal være den beholderen du til enhver tid bruker. Ved kommunikasjonen 2. Sende bakgrunnsdata til PPC sendes beholdernummer fra veterinærskjemaet til PPC. Hvis du har din faste sæddunk, slipper du altså å tenke på dette (beholdernummer rapporteres til GENO slik at okseforbruket kan kontrolleres). Husk at alle semindata får samme beholdernummer – d.v.s. hvis du bytter dunk må du overføre til PC'en først (eller rette beholdernummer i seminskjemaet etterpå!)



Registrering

I registreringsbildet foreslås dagens dato, men den kan overprøves. Søk på navn slår til etter at du har skrevet inn 2 tegn. Listen oppdateres fortløpende ettersom du skriver. Type velges fra listen. Ved sædhenting blir det sett bort fra navn-feltet (skal ikke føres). Når dette er gjort, trykker du på menyvalget Ny (teksten endrer seg alt etter om du velger journal, semin eller sædhenting) for å gå videre i registreringen.

Registrere kunde / editere kunde / ny kunde

Finnes det ikke noen tilslag på det du skriver inn i navn-feltet, vil du få spørsmål om du vil opprette ny kunde når du trykker på ny (menyvalget endrer seg alt etter hvilken type du velger) nede på menyen. Du kommer da til kundearkivet der du kan legge inn adresse, postnr, vanligste dyreslag, kjøresoner, produsent- og kontonummer. Etter overføringen til PC'en kommer disse opplysningene inn i kundearkivet der du kan legge på flere

opplysninger om den nye kunden. Opplysningene om gamle kunder kan også redigeres ved å gå til System->Meny->Kunder.

Semin ku

Når du kommer over i semin ku, kan du øverst se hvilken eier og dato du holder på med.

Under selve føringen får du mye hjelp: Lønnskode foreslås med en 1-er kode avhengig av ukedag. Inseminasjonsgang og kunr må fylles ut. Legg merke til at markøren automatisk hopper til neste felt dersom programmet vet at det ikke kan skrives inn flere tegn i et felt (for eksempel max 1 tegn i ins. gang). Etter at oksenr er utfyllt, kontrolleres dette mot gyldige okser, og ved bruk av kjøttfe kommer spørsmål om type ku fram. Forsøkskode brukes til å registrere koder som sendes til Geno for statistikk.

Etter at alle felt er utfyllt, må du trykke Lagre på menyen. NB! Det finnes ikke autolagring så dersom du bare lukker vinduet uten å lagre, går informasjonen du skrev inn tapt. Vinduet lukkes. Du kommer da til et oversiktsbilde for semin der den registreringen du akkurat la inn vises som en linje. Etter hvert som flere seminregistreringer fylles ut (også drektighetsundersøkelser), vil du her få god oversikt over hva du har registrert.



Semin gris

Stort sett samme type hjelp og oppsett som ved ku semin.

Sædhenting

Føres i eget bilde med valg på type henting og km.

Km ekstra

Ekstra kjøring ved inseminering skal føres og innrapporteres fra 01.01.2005-31.12.2005. Føres i eget bilde med valg på lønnskode (alltid 10) og antall km.

Journal

Journalen ligner i hovedtrekk journalen i hovedprogrammet. Dato og kunde vises øverst på skjermen. Legg merke til at enkelte oppslagsfelt har et rødt kryss (for eksempel tjeneste). Dette brukes til å slette det som står i feltet slik at du slipper å trykke mange ganger på backspace. Hvis kunden er registrert med egne dyr, kan disse velges fra liste. Hvis du vil registrere nytt dyr som skal knyttes til kunden, skriver du inn det nye navnet og trykker på diskettikonet. Du får da spørsmål om du vil legge inn nytt dyr. Svarer du ja, åpnes dyrskjema der du kan registrere opplysninger om dyret. Dette kan være praktisk ved besøk til kjæledyr eller hest. Dyreslag velges fra liste. Legg merke til at dersom prislinje er fylt ut lenger nede, så kan priser endre seg dersom disse er avhengig av dyreslag. Antall foreslås som 1, men kan overprøves. Vis beh. har en standardverdi som du selv setter under Vedlikeholdsrutiner i hovedprogrammet. Det gjelder om behandling skal vises på fakturaen eller ikke. Her kan du overprøve valget ditt for å gjelde denne ene journalen. Klinisk journal er låst og blir krysset av automatisk når du velger Klinisk Journal på menyen.



Anamnese er et langt tekstfelt der du skriver fritt. Tjeneste velges på vanlig måte med fortløpende søking ettersom du skriver inn eller ved å velge fra listen. I det du velger tjeneste, dukker valgte standardbehandling og priser fram. Her kan du selvsagt endre behandling med å skrive inn eller velge fra listen. Redigerer du behandlingen, får dette ingen betydning for neste gang du bruker denne tjenesten. Standardbehandlingene må redigeres i hovedprogrammet. Etter behandling kommer du inn på honorar, medisin og utstyr knyttet til denne tjenesten. Alle felt kan overprøves. Bruk komma (ikke punktum) mellom kroner og øre. Til slutt må du trykke på Lagre. Gjør du ikke det, mister du informasjonen du skrev inn når du lukker skjemaet! Du blir så ført til oversiktsbilde for journal der dyr, dyreslag og tjeneste vises (blir 1. tjenestelinje i journalen) øverst, og de økonomiske opplysningene nederst. Nederst i høyre hjørne settes betaling til den innstillingen du har valgt i Vedlikeholdsrutiner. Du kan imidlertid overprøve. Husk også her å trykke Lagre! Valgene er kontant (med penger), underskrift (kvitteringsblokk), nei (ikke betalt) eller faktura.

Hvis det i ProfVet Praksis er valgt kjøringsautomatikk i Vedlikeholdsrutiner-Takster, vil dette fungere på samme måte i PPC som i ProfVet Praksis.

Klinisk journal

Trykker du på Klinisk journal i journalen, åpnes klinisk journal med akkurat de samme feltene som hovedprogrammets kliniske journal. Finnes det allerede en klinisk journal knyttet til journalen, åpnes denne.



5. Tips og triks.

Snarvei

Etter at programmet er installert, finner du det på Start->Programs. Vil du ha en snarvei direkte på Start-menyen, gjør du følgende:

Gå til Start->Settings->Menus. Her listes alle installerte program opp. De som har hake foran, er de som blir vist direkte under Start-menyen. Ganske langt nede i listen finner du ProfVet Mobil. Huk av for denne. NB! Du kan maks ha 7 program avhuket samtidig.

Du kan også endre på hva de faste tastene på PPC skal gjøre når de trykkes på. Man kan for eksempel få ProfVet Mobil til å starte ved å trykke på en bestemt tast. Gjør følgende for å stille inn det:

Gå til Start->Settings->Buttons. Her merker du av hvilken knapp du vil bruke og så velger du ProfVet Mobil under Assign a program.

Uklar skjerm

Er skjermen uklar, kan det være at den ikke takler ClearType fonter på en fornuftig måte. Dette er satt på som standard på Windows Mobile 2003. For å slå av, gjør følgende:

Gå til Start->Settings->System->Screen. Velg ClearType fanen nede og ta bort hake for Enable ClearType hvis det fins. Du vil med en gang se om bokstavene blir klarere.

Låst skjermbilde

Dersom du står inne i for eksempel journal og programmet blir minimert, for eksempel ved at en trykker på Start->Today, skaper det et lite problem når du henter fram igjen journalen. Når dette lukkes, vil de vinduene som lå bak (Journaloversikt, Registrer, Start) fortsatt være minimerte. Du blir dermed låst i det vinduet du sto i (her Journalen). Løsningen er å trykke på (c)-symbolet på menyen. Dette skal finnes i alle skjema og gjør at programmet går til oppstartbilde i ProfVet Mobil.